

3-5 院内項目登録

「項目マスタ」のページをご参照下さい。


3-6 院内項目入力

ここでは、病院内で行った検査結果のデータ入力・変更を行います。

起動

i. 院内項目を入力する患者様の「単回表示」を表示します。


メニューバーより、「検査データ」－「新規」「変更」「削除」を選択します。

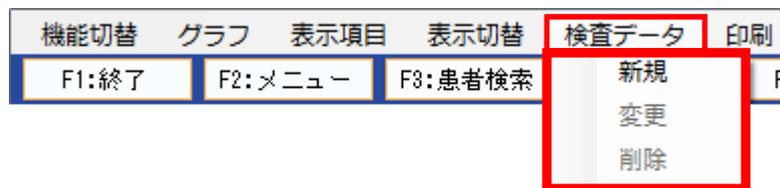

●検査データの新規入力のみ、「時系列表示」から起動できます。

各部機能

検査データ編集ウィンドウ

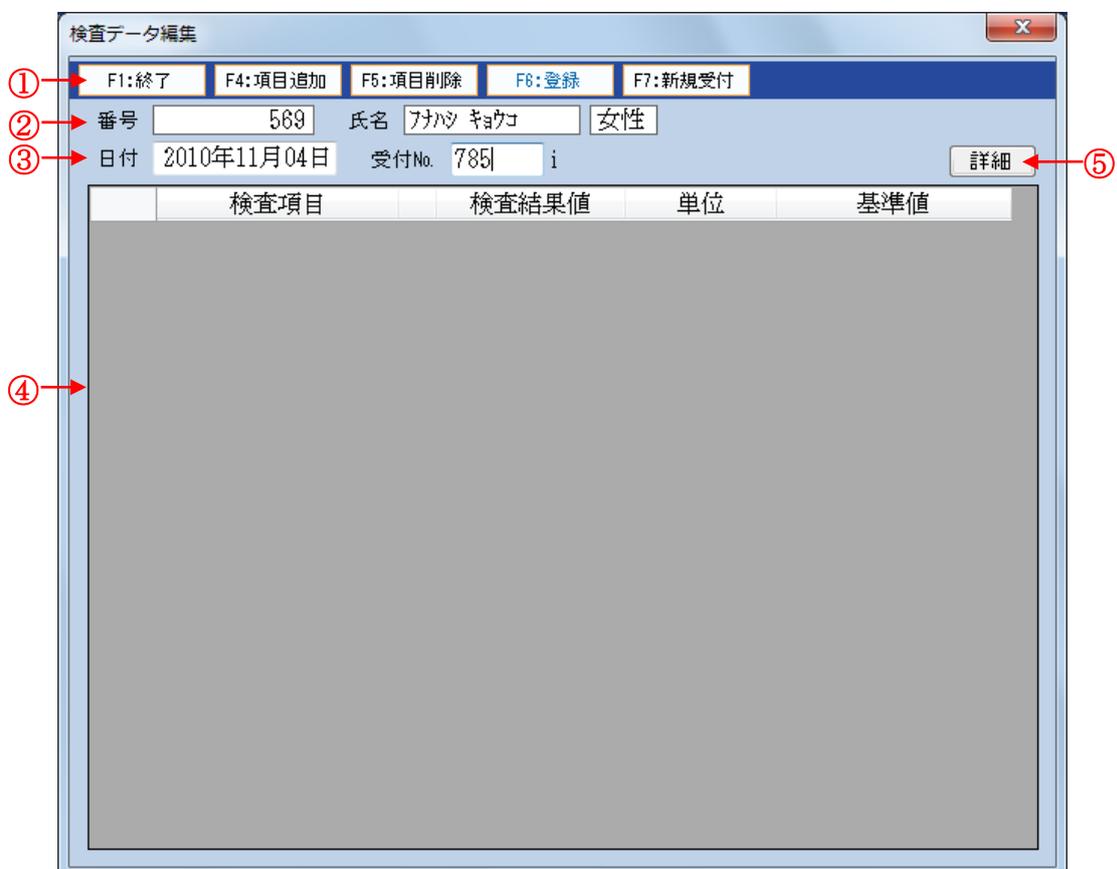

- ① ツールバー
クリックするとボタンに書いてある操作を行います。
- ② 患者情報表示
入力対象の患者の各データを表示します。
- ③ 検体情報入力
受付日、受付 No. を入力します。
- ④ 検査データ入力
選択した検査項目を表示します。また、入力もこの欄で行います。
- ⑤ 詳細
検体コメントを作成する場合に使用します。
「詳細」をクリックして画面を開き、検体コメント欄に直接入力を行います。
入力後、「詳細」をクリックして終了します。

検査データ表示・入力部分

検査項目	検査結果値	単位	基準値
①	②	③	④

- ① 検査項目名称
選択した検査項目の名称を表示します。
- ② 検査結果値
この部分をクリックして検査データを入力します。
- ③ 単位
各検査データの単位を表示します。
- ④ 基準値
各検査データの基準値を表示します。


操作

検査データの新規登録


- i. 「起動」に従って、検査データ編集ウィンドウを表示します。
- ii. 受付日、受付番号を入力します。
- iii. 「F4: 項目追加」を選択すると「検査項目一覧」ウィンドウが表示されるので、登録する検査項目を選択して、「Ent: OK」をクリックします。
選択した項目を削除する場合は、「F5: 項目削除」をクリックします。

- iv. 追加した検査項目の検査結果値の白枠をクリックして数値を入力し、「F6：登録」をクリックします。

確認ウィンドウが表示されるので、「はい(Y)」をクリックします。

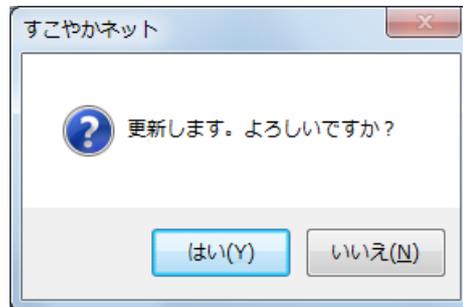

- 入力した検体が存在している場合は、メッセージが表示されるので、受付 No. を変更し、「F6：登録」をクリックします。

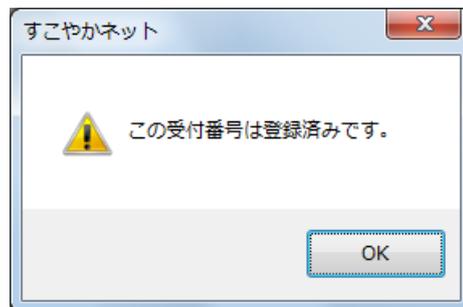

- 続けて入力を行う場合は、「F7：新規受付」をクリックすると、新規画面が表示されます。

検査データの変更


- i. 「起動」に従って、検査データ編集ウィンドウを表示します。
- ii. 変更を行い、「F6：登録」をクリックします。

確認ウィンドウが表示されるので、「はい(Y)」をクリックします。

検査データの削除

- i. 「起動」に従って、メニューバーより、「検査データ」－「削除」を選択します。

確認ウィンドウが表示されるので、「はい(Y)」をクリックします。

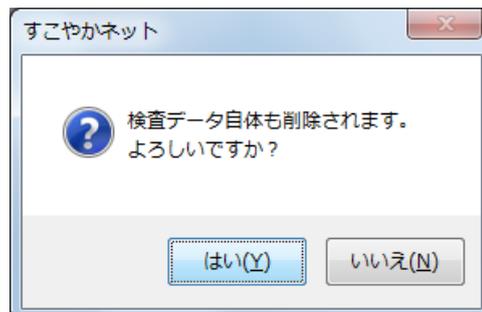

院内検査項目の表示

院内検査の場合は、受付 No. の末尾に「 i 」を表示し、検査項目名称の先頭に「 * 」を表示します。

単回表示

(1) 受付番号単位で表示する場合

検査項目	検査結果値	Lo<----->Hi	単位	基準値
1 *身長	159		cm	
2 *体重	53		kg	
3 *体脂肪率	H 25		%	
4 *視力	1.5			
5 *血圧	80-125		mmHg	
6 *安静心電図	5			
7 *ホルター心電図	8			
8 *胸部X線	所見なし			
9 *健診	企業健診			

(2) 日付単位で表示する場合

検査項目	検査結果値	Lo<----->Hi	単位	基準値
8 MCHC	34.1	*	g/dL	32-36
9 血小板	20.1	*	$\times 10^4 / \mu L$	12.9-37.2
10 総ビリルビン	0.8	*	mg/dL	0.2-1.0
11 AST(GOT)	27	*	IU/L	5-40
12 ALT(GPT)	31	*	IU/L	5-40
13 γ -GTP	12	*	IU/L	0-73
14 コリンエステラーゼ	371	*	IU/L	203-480
15 中性脂肪	140	*	mg/dL	30-150
16 HDL-コレステロール	41	*	mg/dL	40-100
17 LDLコレステロール	78	*	mg/dL	70-140
18 LDL-C/HDL-C比	1.9			
19 尿素窒素	11.1	*	mg/dL	8.0-20.0
20 クレアチニン	0.6	*	mg/dL	0.4-1.2
21 尿酸	3.9	*	mg/dL	7.0未満
22 Na	143	*	mEq/L	135-150
23 K	3.9	*	mEq/L	3.6-5.0
24 Cl	107	*	mEq/L	98-109
25 血清鉄	135.6	*	$\mu g/dL$	70.0-160.0
26 *身長	159		cm	
27 *体重	53		kg	
28 *体脂肪率	H 25		%	
29 *視力	1.5			
30 *血圧	80-125		mmHg	
31 *安静心電図	5			
32 *ホルター心電図	8			
33 *胸部X線	所見なし			
34 *健診	企業健診			

この患者の検査データを表示しています。(↑↓:カーソル移動 ←→:履歴移動)

時系列表示

【検査結果】時系列表示

機能切替 グラフ 表示項目 検査データ 印刷

F1:終了 F2:メニュー F3:患者検索 F4:単回 F6:グラフ F9:印刷

番号 569 氏名 ｱｶｼ ﾕｶｺ 女性 生年月日 昭和12年01月29日 コメント

項目名	受付日	09/10/27	09/12/01	10/02/16	10/02/16	10/02/27	10/02/27	10/06/15	10/11/04	10/11/04	11/01/25
28 C1		810	1448	516	631	528	826	809	785	107	
29 血清鉄									135.6		
30 血糖											
31 血糖(前)							77				
32 血糖(30分)							104				
33 血糖(60分)							127				
34 血糖(90分)							126				
35 血糖(120分)							105				
36 ｹﾞﾙﾏﾝA1c											
37 ｹﾞﾙﾏﾝA1c					H	5.5					
38 RLP-ｺﾞﾘｽﾃﾛｰﾙ											
39 酸化LDL(MDA-LDL)								89			
40 TSH								1.64			
41 遊離T4								1.07			
42 大腸がん検診											
43 便ｹﾞﾙﾏﾝ-1					(-)0						(-)0
44 便ｹﾞﾙﾏﾝ-2					(-)0						(-)0
45 *身長										159	
46 *体重										53	
47 *体脂肪率										H	23
48 *視力										1.5	
49 *血圧										80-125	
50 *安静心電図										5	
51 *ホルター心電図										8	
52 *胸部X線										所見なし	
53 *健診										企業健診	

この患者の検査データを表示しています。